


Comece acessando seu navegador para utilizar a internet:



Para acessar a plataforma da ON RAD no sistema do **Paciente** é necessário entrar pelo link:

<https://bit.ly/cms-laudos>

(Copie e cole no seu navegador)

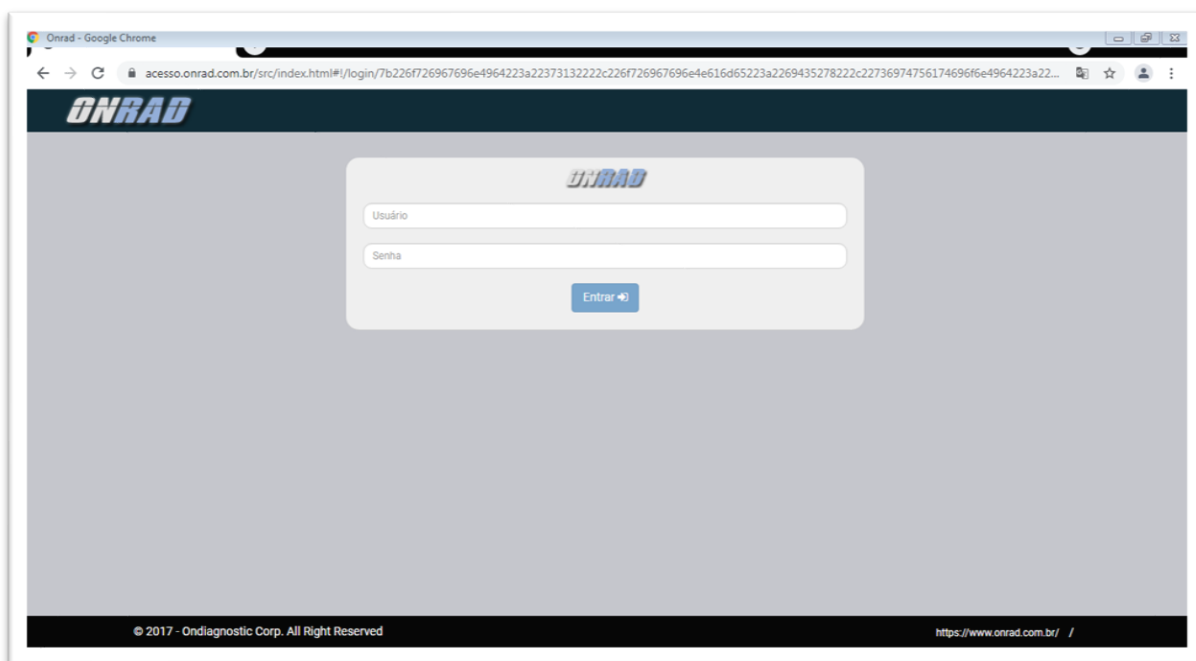


Nele é necessário inserir as informações de **Login** e **Senha** fornecidas pelo **Paciente** através da ordem de Retirada.

Para acessar a plataforma da ON RAD no **Sistema Médico** é necessário entrar pelo link:


<https://icrx.onrad.com.br/index.php#/>

(Copie e cole no seu navegador)

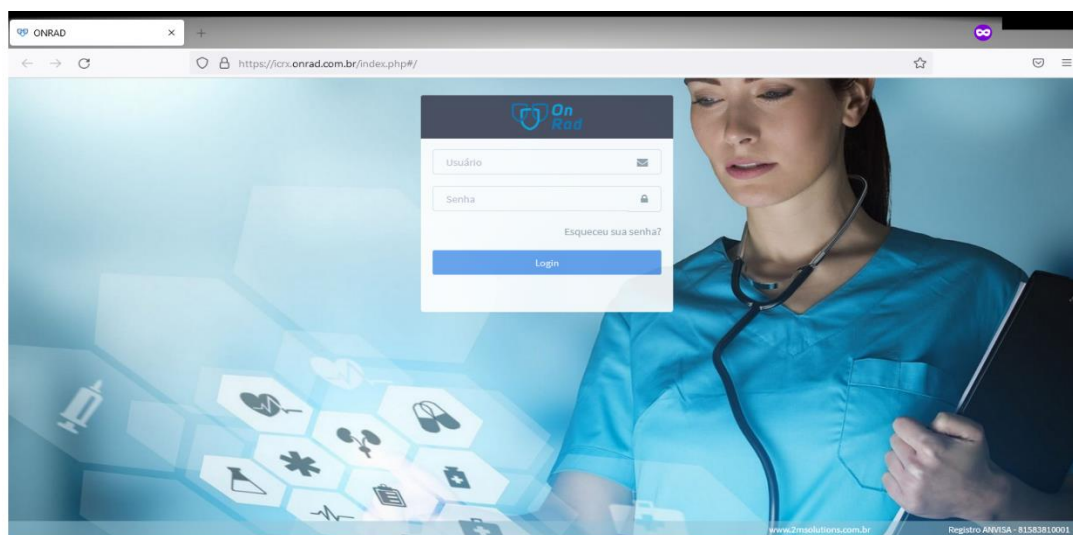

Efetue o **LOGIN** com o seu **Nome De Usuário** e sua respectiva **Senha**.


Após realizar o Login com sucesso, você será redirecionado para o painel de controle da plataforma.

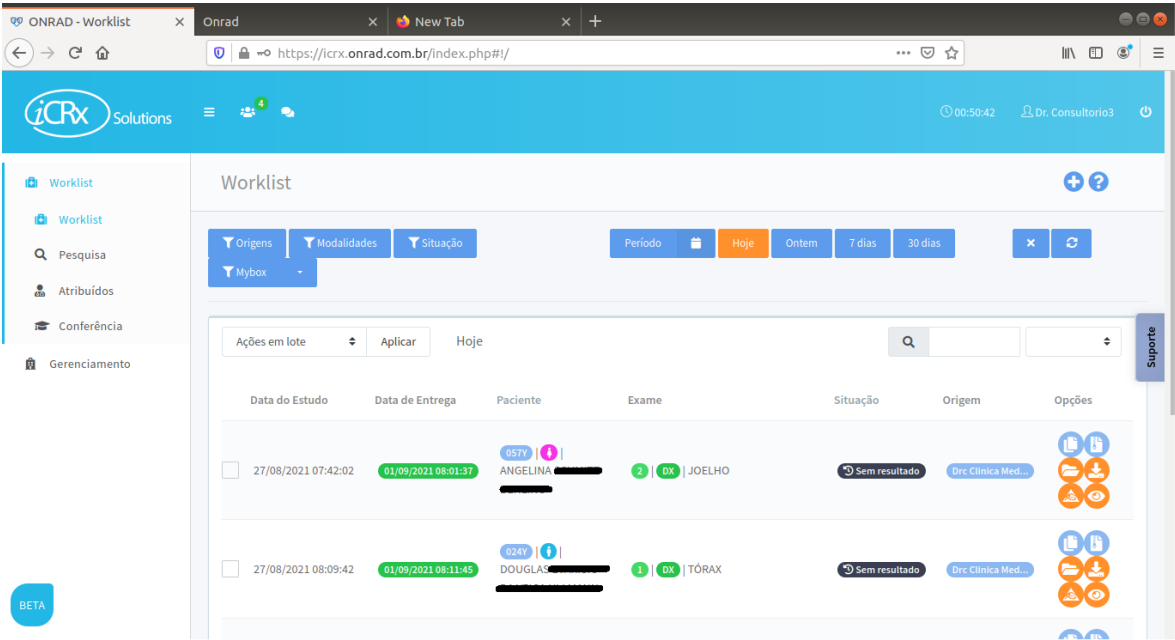

Nessa página de constará os registros de radiografia com:

Data do Estudo Data de Entrega Paciente Exame Situação Origem Opções

Para encontrar com maior facilidade o Exame requisitado, é sugerido fazer uma pesquisa pelo nome do Paciente.

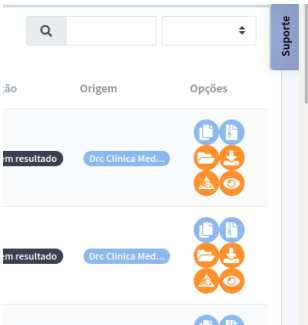

Na parte Direita da Página se encontra um campo de Pesquisa, no qual podemos buscar pelo nome do Paciente.

Outra opção é realizar uma busca aba de pesquisa do Gerenciador.

(Na extremidade esquerda da página).



Solutions

3

00:58:02

Dr. Consultorio3

Worklist

Worklist

Pesquisa

Atribuídos

Conferência

Gerenciamento

Pesquisa

Angelina

Paciente

Pesquisar

Ações em lote

Aplicar

Hoje

Q

10 Linhas

27/08/2021 07:42:02

01/09/2021 08:01:37

057Y

ANGELINA

2

DX

JOELHO

Assinado

Dr. Clínica Med...

Mostrando de 1 à 1 de 1 registros

Tempo de requisição: 2461milissegundos

Termos de uso

Fale Conosco

ONRAD © 2021

Registro ANVISA - 81583810001

Campo para Pesquisa do Nome

Seleção de Atributo Buscado

OPÇÕES:



Ao lado estarão disponíveis opções para gerenciamento do exame.



- Duplica o Estudo.



- Visualiza/Adiciona Documentos Digitalizados.

Documentos Digitalizados

Selecionar arquivo

+

Enviar arquivos

Fechar



- Visualiza o Histórico do Paciente

Histórico


PACIENTE RELATA QUE CAIU DE MOTO, E BATEU COTOVELO ESQUERDO.
DOR LOCAL

Cancelar

Salvar




- Visualizar Laudo

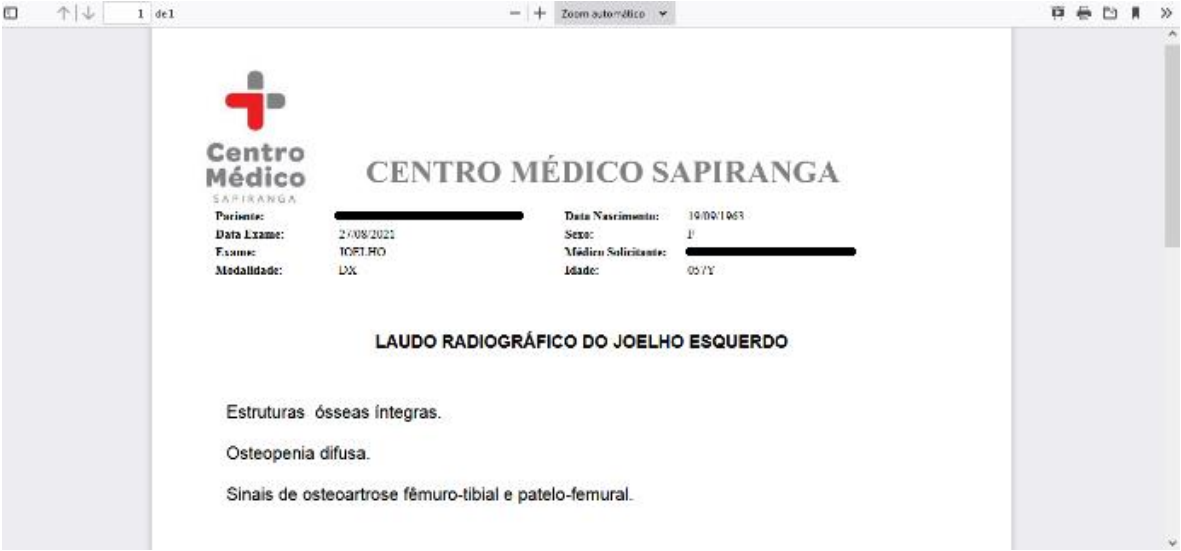

Navegador Exibe Laudo em PDF



- Faz Download Das Imagens do Exame

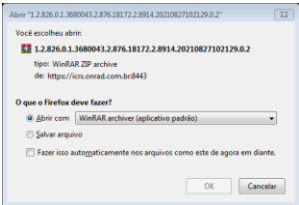


Imagens Compactadas em Arquivo ZIP



- Visualiza no OsiriX (Plataforma MacOS).



- Visualiza Imagens

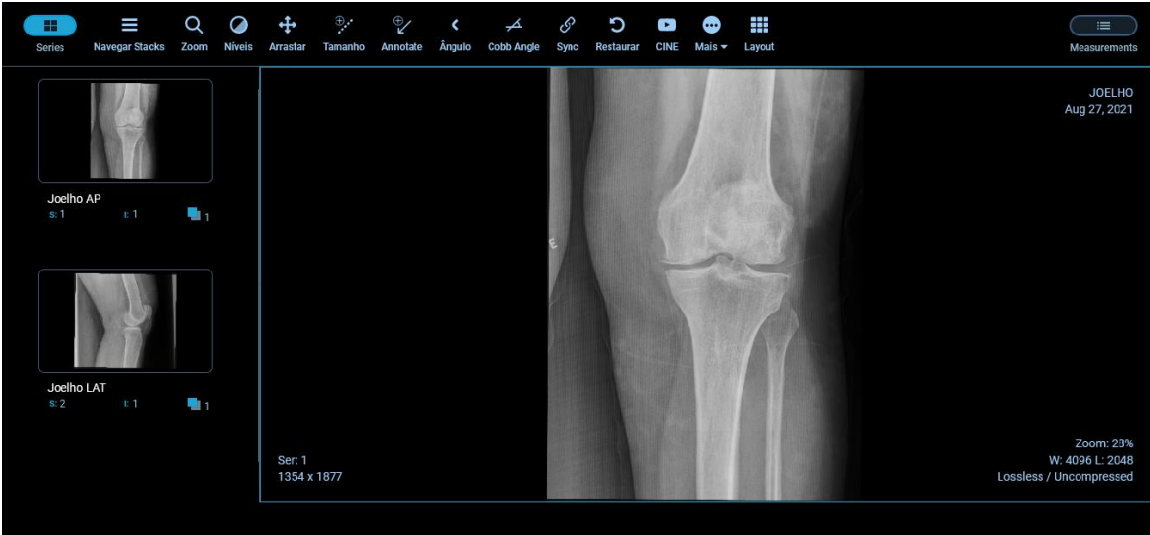


Plataforma Web-Viewer, para visualização e Gerenciamento de Radiografias Digitalizadas.

Plataforma Web-Viewer



O Web-Viewer disponibiliza muitas ferramentas para a manipulação e visualização do Raio-X

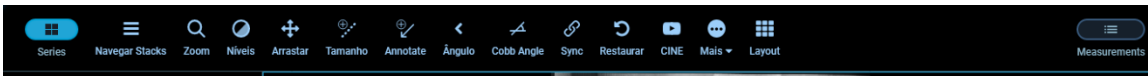

Barra de Ferramentas



Amplia a imagem para visualização mais detalhada.

Pressionando o botão esquerdo do Mouse e arrastando para baixo amplia a imagem para visualização mais detalhada. E arrastar para cima reduz o zoom da visualização.



Controla os níveis de contraste da imagem.

Pressionando o botão esquerdo do Mouse e arrastando para baixo aumenta os níveis de contraste.

E arrastando para cima diminui os níveis



Arrasta a imagem no background.



Mede o tamanho em Pixels.



Cria uma anotação com uma flecha p/destacar.



Tira uma amostragem de ângulo traçado por uma linha.




Tira uma amostra de ângulo de Cobb.




Restaura a imagem das últimas alterações feitas.




Selecionando o campo de ***mais*** opções no qual disponibilizará mais algumas ferramentas:

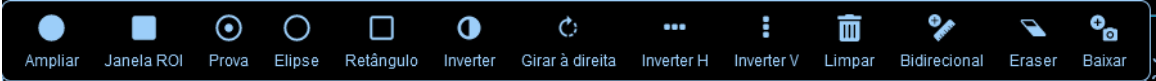

Cria um campo ampliando uma seleção através do mouse.

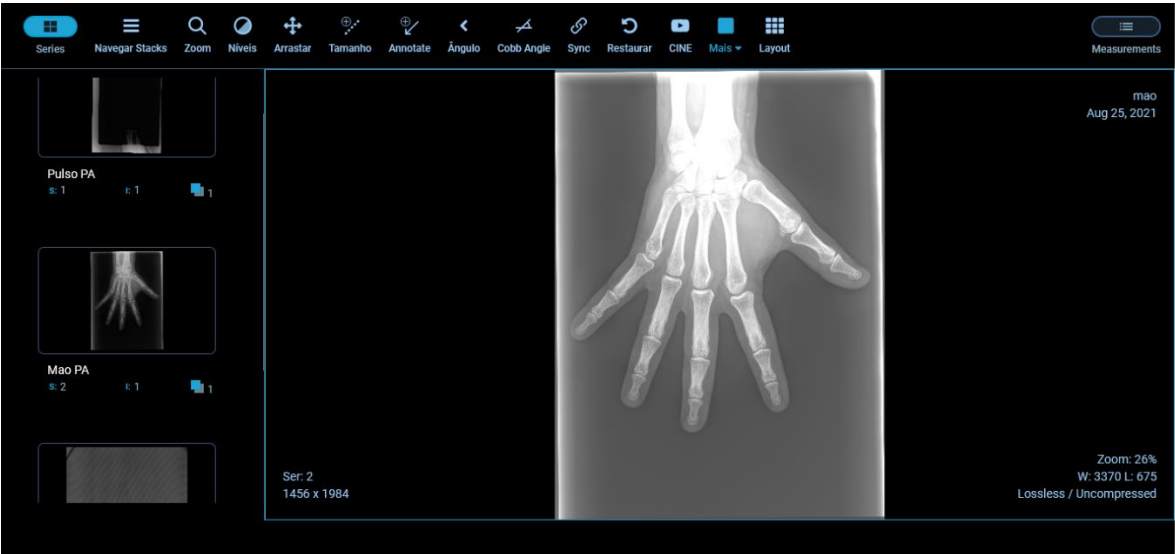


Cria uma visualização de Janela ROI.

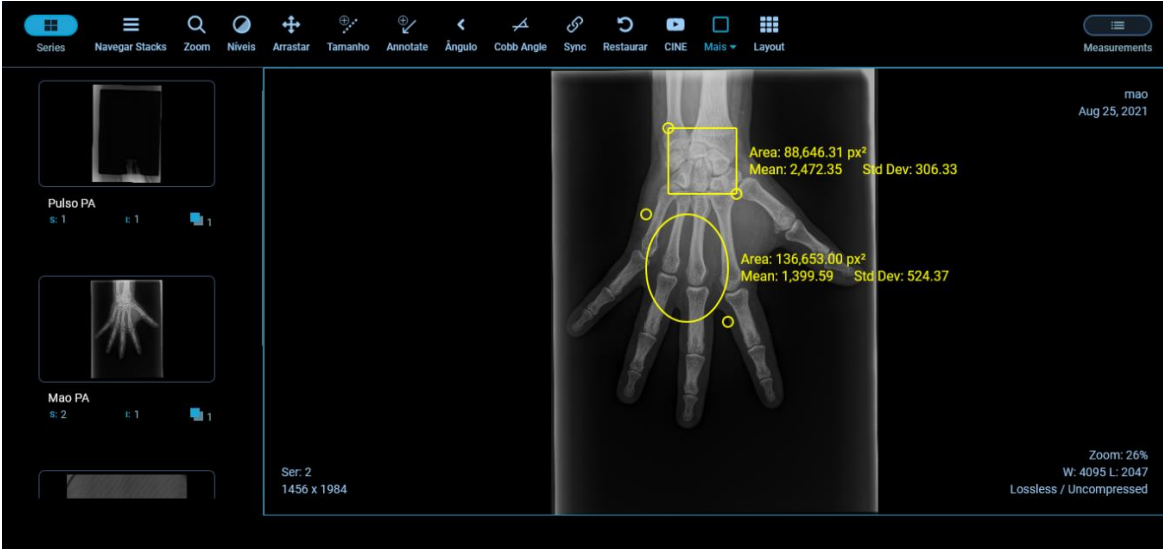


Cria campos de seleção com as formas geométricas de Elipse e/ou Retângulo.



Inverte as cores da Imagem.

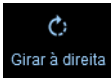

Gira a imagem no sentido horário.

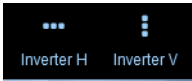

Inverte horizontalmente e verticalmente a imagem.



Limpa alterações feitas.



Borracha de alterações.



Faz Download das Imagens do Exame.

Download High Quality Image

Please specify the dimensions, filename, and desired type for the output image.

Image width (px)

512

Image height (px)

512

File name

image

File type

jpg

Show Annotations

Image Preview

Viewport Preview

Cancelar

Baixar

É possível dimensionar a imagem e selecionar o formato de imagem (Jpg, Png).